



*Invacare*® | **ORION** METRO

Savršen spoj udobnosti, sigurnosti  
i pouzdanosti



Bez obzira da li uživate u kratkom putovanju na kavu s prijateljima ili se vozite do lokalne trgovine ORION METRO je idealan izbor koji će vas odvesti tamo.

Novi, ergonomski dizajnirani Orion METRO projektiran je iznova s fokusom na ključne značajke važne kako novim tako i iskusnim korisnicima skutera.

Rezultat je novi ORION METRO opremljen s brojnim karakteristikama koji osiguravaju korisnicima iskustvo jednostavne, sigurne i udobne vožnje u kojoj mogu uživati. ORION METRO je savršeni spoj udobnosti, sigurnosti i pouzdanosti.



### Kontrolirani i čvrsti pogon

Sustav ovjesa na kompaktnom Orion METRO dizajniran je za vožnju raznovrsnim površinama i terenima, omogućujući vam da se opustite i uživate u kontroliranom, čvrstom pogonu i udobnosti. Snažan motor u kombinaciji s pneumatskim gumama od 11" će vas odvesti glatko i sigurno preko prepreka ili na neravnom terenu.

### Sigurnost kao standard

Osim jedinstvenog sustava osvetljenja, Orion METRO opremljen je elektroničkom značajkom za smanjenje brzine u zavojima koja automatski smanjuje brzinu prilikom skretanja, osiguravajući sigurne i udobne manevre u svakom trenutku.

Nadalje, dvostupanjski sustav za isključivanje aktivira kočnice i zakloči skuter, ukoliko je nije u pogonskom načinu rada.

Ove značajke, u kombinaciji s opsežnim testiranjem provedenima u neovisnom njemačkom TÜV laboratoriju, osiguravaju sigurnost kao standard kod Invacare skutera Orion METRO.

### Jednostavnost i mogućnost servisiranja

Koristeći niz kvalitetnih komponenti, napravili smo Orion METRO kako pouzdanim, tako i jednostavnim za servis.

Jednostavno uklonite gornji poklopac za lak pristup baterijama, elektronici, motoru i kabelima.

Elektronika i motor su zaštićeni od korozije, vode i prljavštine te tako štitimo vitalne funkcije skutera i sprječavamo nepotrebne kvarove.





### Podesivi upravljački stup

Korisnici mogu lako podesiti upravljački stup pomoću poluge kako bi odgovarao njihovim potrebama.



### Ergonomski upravljač

Naš ergonomski dizajnirani upravljač olakšava upravljanje, te omogućuje bolju kontrolu.



### Kočnica na upravljaču

Omogućava trenutno kočenje i zaustavljanje ukoliko je potrebno.



### Kočiona svjetla

Jasna i svijetla kočiona svjetla upozorava ljude da skuter usporava.



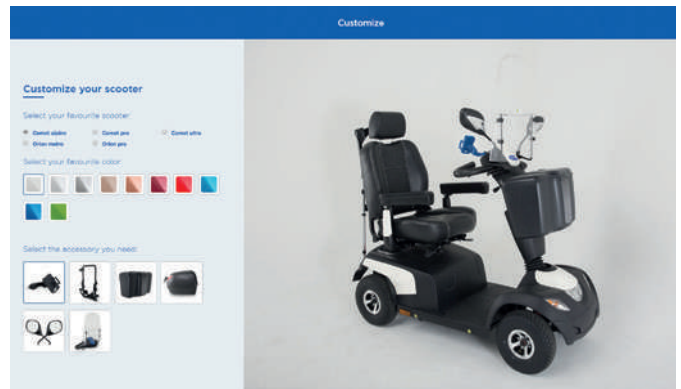
### Dvostupanjska poluga za isključivanje

Dvostupanjska poluga za isključivanje onemogućava neželjeno kretanje skutera, aktivirajući kočnice.



### Automatsko smanjenje brzine

Automatsko smanjenje brzine smanjuje brzinu u zavoja za dodatnu sigurnost.

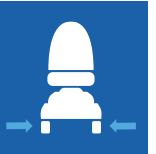


### Prilagodite svoj skuter s poklopcima i priborom

Izaberite između 10 boja poklopaca i preko 25 različitih pribora za prilagodbu skutera u svoj individualni stil. Da biste saznali više, posjetite našu web stranicu posvećenu skuteru na: [www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com).

## Tehnički podaci

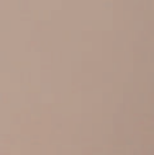
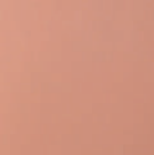
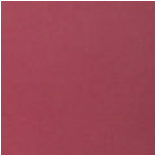
Za sveobuhvatnije informacije o pred-prodaji o ovom proizvodu, uključujući korisnički priručnik za proizvode, molim vas pogledajte: [www.invacare-eu-export.com/orion-metro-ma-76orimen](http://www.invacare-eu-export.com/orion-metro-ma-76orimen)

|                    | Širina leđnog naslona                                                                       | Sjedna dubina                                                                                                          | Sjedna visina od poda                                                                                           | Visina leđnog naslona                                                                                                  | Širina podvozja                                                                              | Ukupna duljina                                                                                 | Težina                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orion Metro</b> | <br>510 mm | <br>Deluxe: 470 mm<br>Premium: 460 mm | <br>Min. 440 mm<br>Max. 510 mm | <br>Deluxe: 490 mm<br>Premium: 630 mm | <br>660 mm | <br>1270 mm | <br>110 kg |

|                    | Najteži dio                                                                                | Maks. težina korisnika                                                                      | Kapacitet baterija                                                                                            | Radius okretanja                                                                             | Maks. visina prepreke                                                                       | Visina podvozja od poda                                                                      | Maks. siguran nagib                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orion Metro</b> | <br>57 kg | <br>136 kg | <br>2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM | <br>2600 mm | <br>80 mm | <br>78 mm | <br>6° |

|                    | Maks. doseg                                                                                  | Maksimalna brzina                                                                                   | Kapacitet motora                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orion Metro</b> | <br>54 km | <br>10 / 12 km/h | <br>10 km/h: 240 W / 600 W <sup>1</sup><br>12 km/h: 550 W / 1500 W <sup>1</sup> |

## Boja poklopaca

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Marble White                                                                        | Sapphire Blue                                                                       | Jade Green                                                                          | Luxor Beige                                                                         | Crystal Copper                                                                      |
|  |  |  |  |  |
| Carmine Red                                                                         | Iconic Chrome                                                                       | Diamond Silver                                                                      | Electric Blue                                                                       | Jasper Red                                                                          |
|  |  |  |  |  |

## Boja presvlaka

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Black Vinyl                                                                           |
|  |