



E-MOTION®

DODATNI ELEKTRIČNI POGON ZA
INVALIDSKA KOLICA

**MOĆ U
VAŠIM
RUKAMA.**



MOĆAN. LAGAN.
DOBRO OSMIŠLJEN.

LAKŠE JE KRETATI SE

Koncept kotača e-motion je iznimno jednostavan: e-motion pogonske kotače možete kombinirati s gotovo svim invalidskim kolicima pomoću dva diskretna prilagodnika. Tijekom kretanja, senzori ugrađeni u obruče za guranje mjere vaše kretanje za vožnju i pružaju vam željenu snagu motora. To vam omogućuje kretanje, upravljanje i kočenje invalidskim kolicima bez mnogo truda. Težine svega 7,8 kg po pogonskom kotaču, e-motion je jedan od najlakših aktivnih dodatnih pogona na tržištu.

Pogon e-motion odgovara gotovo svim standardnim invalidskim kolicima: samo zamijenite kotače

●●● IZRAĐENO U NJEMAČKOJ





ŽIVITE SVOJ
DAN

BUDITE SAMOSTALNI I OSTANITE MOBILNI

Pogon e-motion daje vam vjetar u leđa potreban da biste svladali svakodnevne, ali i neobične životne situacije, samostalno i bez ičije pomoći. Uz podržavanje brzine do 8,5 km/h*, izvrsno ćete se kretati. Zahvaljujući ugrađenim litij-ionskim baterijama, e-motion ima dolet do 25 km. Stoga se ne morate brinuti o dodatnom punjenju i možete u potpunosti uživati u svojoj samostalnosti.


*6 km/h u standardnoj verziji, 8,5 km/h s paketom Mobility Plus. Više informacija na stranici 16.



Litij-ionske baterije za maksimalni dolet i dugi radni vijek

Moderna i iznimno efikasna tehnologija motora e-motion pruža maksimalni okretni moment za bešumne i lagane pogonske kotače

Integrirani Bluetooth modul za komunikaciju s ECS daljinskim upravljačem ili pametnim telefonom

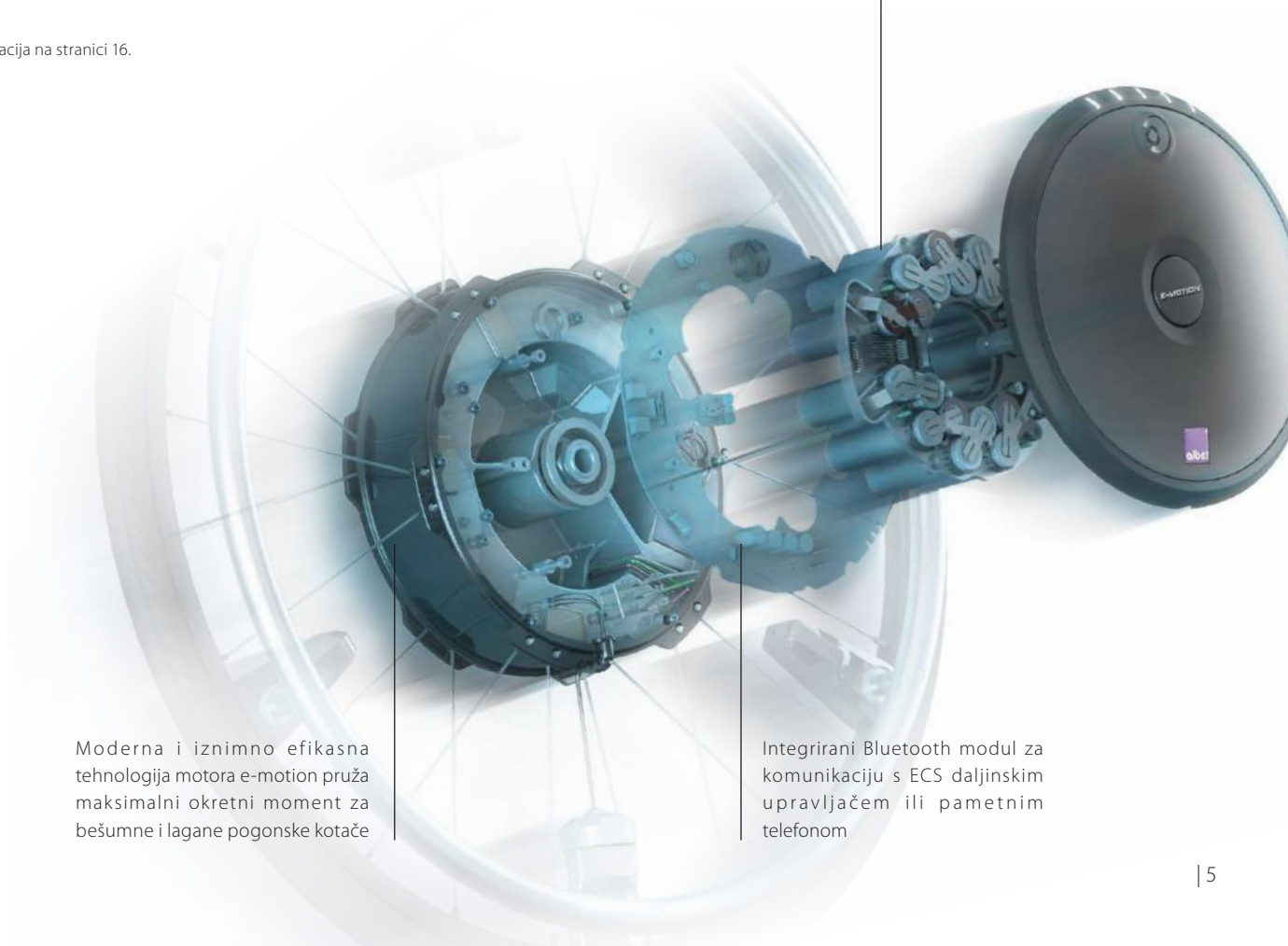




OSTANITE **U FORMI I AKTIVNI**

SVLADAJTE SLOBODNE PROSTORE

Bez obzira radi li se o velikim udaljenostima, kosinama ili nekoliko dodatnih kilograma prtljage, e-motion vas podržava u svakoj situaciji, čak i kada kočite na nizbrdici. To osiguravaju njegovi visoko efikasni i ugodno tihi električni motori. Uz e-motion proširujete radijus svojih radnji, nastavljate se kretati i trenirati svoje vitalne funkcije. Istovremeno, trajno štitite svoje mišiće i zglobove od pretjeranog rada. Na taj ćete način uvijek stići na cilj opušteni i još uvijek biti aktivni!



OPUŠTENO KROZ DAN

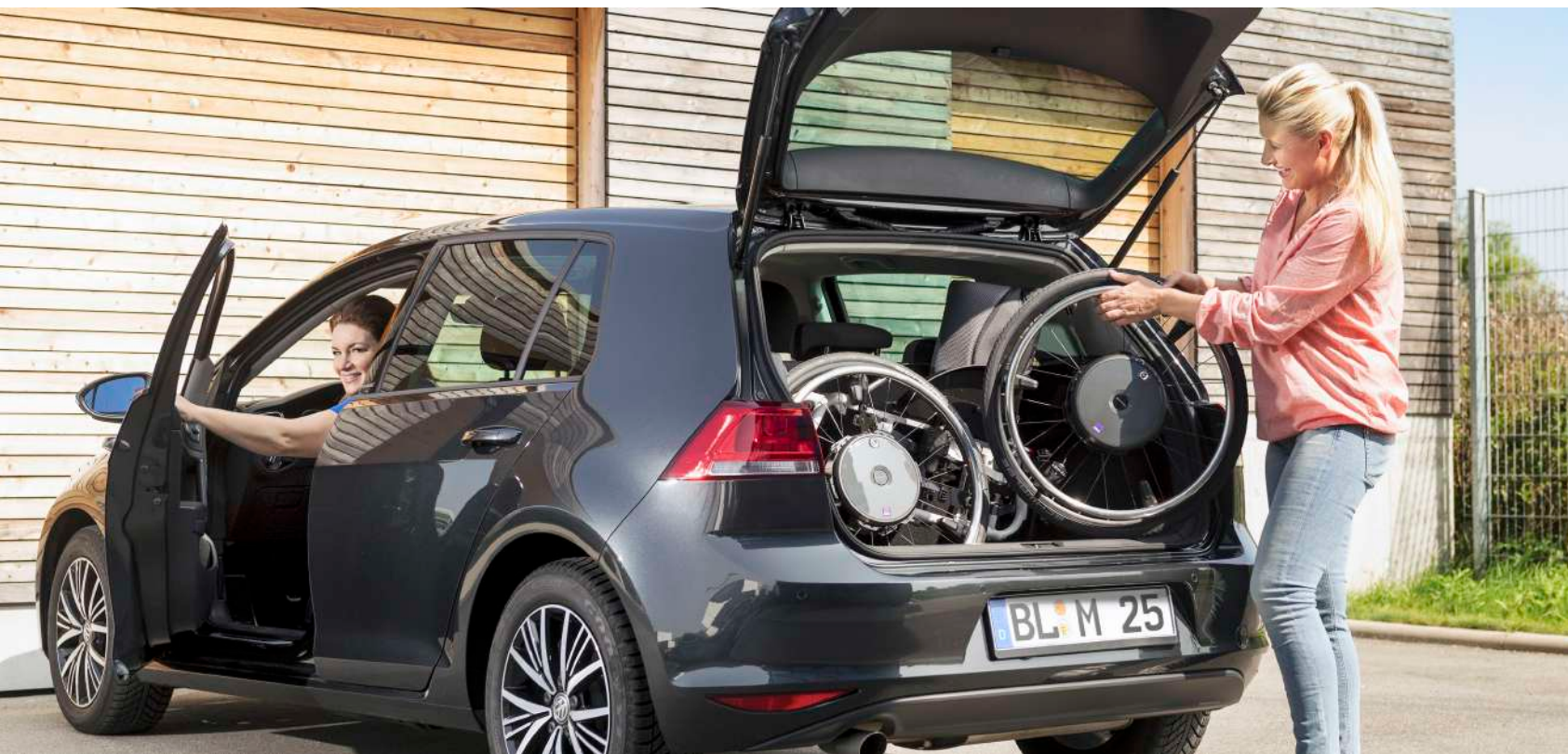

Lagani pogonski kotači e-motion mogu se brzo i lako skinuti s invalidskih kolica i mogu se smjestiti u gotovo svaki prtljažnik.

IDEALNI SUPUTNIK ZA SVAKODNEVNI ŽIVOT

Bez obzira jeste li na poslu, u kupovini ili na odmoru: kotači e-motion su iznimno upravljivi i u svim situacijama se kreću jednako lako kao i ručna invalidska kolica. Kotači e-motion mogu se ukloniti s invalidskih kolica u jednom potezu te umetnuti u bilo koji prtljažnik. Kotači za ručno kretanje se obično i dalje mogu koristiti s istim invalidskim kolicima. Kotači e-motion su uvijek s vama kada putujete, a možete ih ponijeti čak i na zrakoplov.



Brzo i jednostavno: kotači e-motion mogu se brzo pričvrstiti i ukloniti pomoću mehanizma za brzo otpuštanje.



Sve je pod kontrolom: prekidač za uključivanje/isključivanje s magnetskom utičnicom za punjenje EasyConnex. Utičnica punjača akumulatora e-motion automatski pronalazi svoj položaj.



Lagano i diskretno: unaprijed sastavljeni nosač na invalidskim kolicima za postavljanje kotača e-motion

UGODNO UPRAVLJANJE



SVE JE POD KONTROLOM ZAHVALJUJUĆI ERGONOMSKOM SUSTAVU UPRAVLJANJA (ECS)

Pomoću opcionalnog daljinskog upravljača ECS možete jednostavno uključivati i isključivati e-motion iz svog sjedala te prebacivati između dvije različite razine potpore za uporabu u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Dostupan je i poseban način rada za učenje za neiskusne vozače koji vam postepeno predstavlja upravljanje kotačima e-motion zahvaljujući postavci za posebno glatko kretanje. Po potrebi, ECS daljinski upravljač možete upotrijebiti i za aktivaciju patentirane odgode pomicanja na kotačima e-motion. On vas automatski drži na mjestu 5 sekundi čim mahnete ruke s obruča za guranje kada se vozite uzbrdo. To vam daje dovoljno vremena da namjestite ruke bez da se invalidska kolica pomiču unazad.

Daljinski upravljač ECS:
udobno upravljajte kotačima
e-motion iz svog sjedala



SAVRŠENO PRILAGOĐENO MENI



PRILAGODLJIVO POJEDINCU

Kotači e-motion su fleksibilni: kompatibilni su sa širokim rasponom modela invalidskih kolica i mogu se prilagoditi vašim individualnim potrebama. Osjetljivost senzora na obruču za guranje može se zasebno prilagoditi na svakom od pogonskih kotača. Stoga, više ili manje snage u jednoj ruci nije problem. Vaš specijalizirani distributer ili terapeut ima i mogućnost izvršiti daljnja podešavanja vaših kotača e-motion kako bi bili točno prilagođeni vašim potrebama i stilu vožnje. Kotači e-motion dostupni su u tri veličine i mogu se na zahtjev opremiti ergonomskim obručima za guranje. Time se osigurava optimalno hvatanje u svim situacijama vožnje.



Osjetljivost senzora na obručima za guranje prilagodljiva je u sedam koraka



Presvučeni obruč za guranje Quadro: upravljanje i prijenos snage čak i kod ograničene funkcije šaka



APLIKACIJA E-MOTION MOBILITY: PAMETNI POMOĆNIK KADA STE NA PUTU

Pametni telefoni postali su integralni dio našeg svakodnevnog života. Nije potrebno spomenuti da e-motion u potpunosti iskorištava dobrobiti ove tehnologije. Besplatna aplikacija e-motion Mobility pruža vam nekoliko unaprijed postavljenih profila za vožnju:


Standard (standardno): živahno, ali i uravnoteženo upravljanje za svakoga.

Sensitive (osjetljivo): za osobe s ograničenom funkcijom šaka i/ili relativno malom snagom u rukama, kojima je potreban jači dodatni pogon tijekom vožnje.

Soft (nježno): za osobe koje nisu uvježbane i preferiraju pasivniji stil vožnje.

Active (aktivno): za osobe koje imaju punu funkciju šaka i/ili relativno jake ruke, a koje više vole sportski način vožnje.

Također možete pregledati trenutnu brzinu, kilometražu i razinu napunjenosti akumulatora e-motion, te čak snimiti i spremi vožnje putem GPS-a.

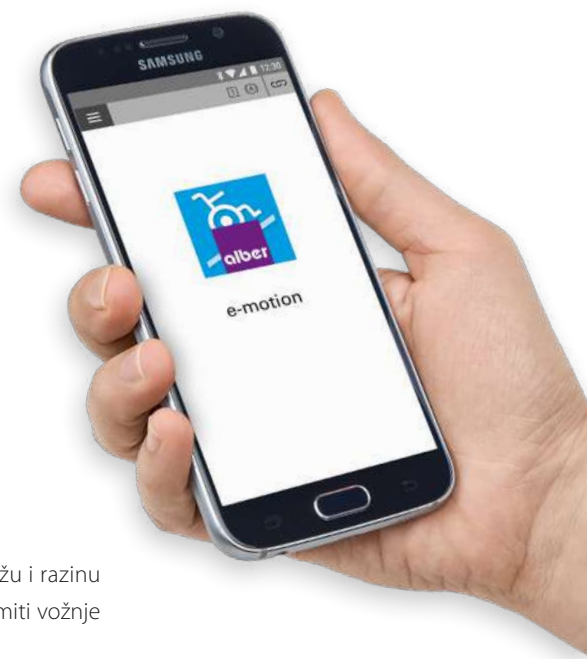

Besplatno preuzimanje



Uz način vožnje Cruise Mode imate slobodne ruke za ljepše stvari u životu. Više informacija možete pronaći na sljedećoj stranici.



IMAJTE
**SLOBODNE
RUKE**



PAKET MOBILITY PLUS:

DOMIŠLJATE DODATNE FUNKCIJE U POKRETU

Imajte obje ruke budu slobodne dok se krećete ili dodatnu dozu brzine kada se želite brže kretati! Uz paket Mobility Plus možete aktivirati cijeli niz dodatnih funkcija u aplikaciji Mobility. Time dobivate još više od svojeg proizvoda e-motion!



PREUZMITE CIJELI PAKET MOBILITY PLUS NA SVOJ PAMETNI TELEFON!W

329,99 EUR uklj. PDV.

Uštedjet ćete 59,95 EUR u usporedbi s kupnjom individualnih funkcija.

Dostupno u trgovinama
Google Play i App Store.





SPEED

- Povećajte maksimalnu brzinu podrške svog pogona e-motion sa 6 km/h na 8,5 km/h i brže dođite na svoje odredište

Cijena: 99,99 EUR uklj. PDV.



REMOTE

- Daljinski upravljate invalidskim kolicima bez korisnika putem pametnog telefona, npr. radi „parkiranja“
- Upravljajte ili putem integriranog senzora nagiba pametnog telefona ili putem virtualne upravljačke palice u aplikaciji

Cijena: 39,99 EUR uklj. PDV.



ECS

- Koristite se funkcijama daljinskog upravljača ECS na svom pametnom telefonu
- Mijenjajte razine pomoći (1, 2, i način za učenje)
- Aktivirajte odgodu pomicanja

Cijena: 99,99 EUR uklj. PDV.



CRUISE

- Idealno za duže vožnje, guranje kolica za kupovinu ili kolica za prtljagu
- Aktivira se kada pokret kretanja prijeđe 2 km/h te održava tu brzinu bez daljnjeg guranja (radi i na uzbrdicama i nizbrdicama)
- Brzina se u bilo kojem trenutku može povećati dodatnim guranjem obruča za guranje ili u aplikaciji


Cijena: 99,99 EUR uklj. PDV.



EASYNAVI

- Jednostavna navigacija od početne točke do odredišta s rutama koje su dostupne invalidskim kolicima
- Funkcija za uvoz ruta (GPX)
- Glasovne upute mogu se prebacivati
- Izvor karti: Open Street Map

Cijena: 39,99 EUR uklj. PDV.

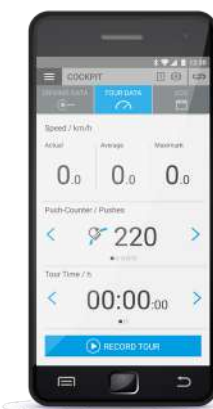

PUSH-COUNTER

- Broji vaše pokrete u vožnji na obročima za guranje e-motion tijekom vožnje
- Putem toga možete procijeniti svoje ponašanje u vožnji i optimizirati svoj stil vožnje

Cijena: 9,99 EUR uklj. PDV.

Cijene su podložne promjenama.

DALJE U NOVE **HEROJSKE** **POTHVATE**



TEHNIČKI PODACI

Težina po kotaču	7,8 kg
Brzina podrške	Maks. 6 km/h (s paketom Mobility Plus maks. 8,5 km/h)
Domet	Do najviše 25 km
Snaga / zakretni moment	80 W / 40 Nm po kotaču
Najveća dopuštena težina korisnika	150 kg
Maksimalna dopuštena ukupna težina	190 kg
Maksimalna mogućnost penjanja	Ovisi o korištenim invalidskim kolicima
Dostupne veličine kotača	22", 24", 25"
Dostupna dodatna oprema*	Paket Mobility Plus, daljinski upravljač ECS, magnetski držač daljinskog upravljača ECS za invalidska kolica, gume Schwalbe Marathon Plus, gume otporne na bušenje veličine 1" od punog PU ili veličine 1 3/8" s oblogom i PU umetkom, obruči za guranje s oblogom, ergonomski obruči za guranje Curve L i Quadro, pokrov za žbice s ukrasom i bez njega

*Još dodatne opreme na www.alber.de



Magnetski držač za postavljanje daljinskog upravljača ECS na invalidska kolica (dodatna oprema)



Obruč za guranje Curve-L: ergonomični položaj ruku i optimizirani prijenos snage za osobe s dobrom funkcijom šaka (dodatna oprema)

MOŽETE SE POUZDATI U E-MOTION

e-motion je proizvod tvrtke Alber, specijalista za osobito prijenosna i praktična pomagala za kretanje. Nezavisne institucije su ispitale i ocijenile izdržljivost, kvalitetu i pouzdanost proizvoda e-motion. Na prvom mjestu su nam testovi sigurnosti, primjerice od strane TÜV-a: u tvrtki Alber ćete uvijek dobiti proizvode čija je sigurnost ispitana u skladu s najnovijim smjernicama za medicinske proizvode.

e-motion je odobreni medicinski proizvod. Vaš će distributer medicinske opreme rado odgovoriti na sva pitanja koja se tiču povrata novaca. e-motion je sukladan CE-u sukladno Europskoj direktivi o medicinskim proizvodima (MDR) 2017/745 te je dobrovoljno podvrgnut testiranju i certifikaciji od strane društva TÜV Süd, u skladu s trenutno valjanim izdanjem standarda EN 12184.

Naše tvrdnje o kvaliteti vaše su jamstvo sigurnosti! Naša tvrtka je certificirana za najnoviji standard upravljanja kvalitetom (uključujući poštivanje najnovijih izmjena) postavljen u standardu ISO 13485 za medicinske proizvode. Koristeći sustav za upravljanje okolišem, certificiran prema standardu ISO 14001, osiguravamo okolišnu sukladnost izrade naših proizvoda.



Automatski punjač akumulatora: automatski se prilagođava naponu mreže te puni oba akumulatora e-motion u svega nekoliko sati (uključeno u dostavu)

„BUDITE UVIJEK **NA VRHU.**
UZ **E-MOTION** MOŽETE I TO.
PROBAJTE GA.”



34.0004.6.02.02 izdanje 11/2019 ©Alber GmbH, Albstadt
Podložno tehničkim promjenama.



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 21
72461 Albstadt, Njemačka
Telefon +49 07432 2006-0
Faks +49 07432 2006-298
info@alber.de

VIDEO O PROIZVODU E-MOTION

Skenirajte QR kod ili unesite adresu:



www.alber.de/e-motion-film