



Orto Rea d.o.o. | Braće Radića 52/b, Jalkovec, Varaždin
tel: +385 42 350 744
email: info@ortorea.hr | <http://www.ortorea.hr>
shop.ortorea.hr

Prava revolucija za
vašu mobilnost



Atraktivan dizajn i inovativna tehnička rješenja: poboljšanje za vaš životni stil

Vaše prijevozno sredstvo od kojeg se nećete odvajati. Praktičan, brz i lak za rukovanje u malom prostoru, omogućit će vam da lako prevladate bilo koju prepreku. Autonomija, neovisnost i sloboda ponovno će biti dio vašeg života.



Tempomat
*(Klaxon opcija)



Brzina za vožnju
unatrag



Indikator nivoa baterije
i gasa



Izuzetno brzo
pokretanje



Parkirna nogica
s kotačima ø 40 mm



16" kotač s regenerativnom
kočnicom



Disk kočica 160 mm



Automatski povratni
sustav upravljanja

3 sekunde koje ti mijenjaju život

Inovativni sustav brzog prihvata (Prijavljen patent) omogućuje da se oslobodi iz invalidskih kolica za nekoliko sekundi i bez napora. Nema nepotrebnih vijaka koji bi se morali svaki puta i ispočetka podešavati.

PRIKLJUČIVANJE



Približite Tibodu do svojih
invalidskih kolica **A**



Gurnite prema dolje **B** i
priključite Tibodu kroz
ultrabrzni sustav priključenja **C**



Povucite tijelo prema natrag **D**
i gurnite upravljač naprijed. **E**

OTPUŠTANJE



Spustite sigurnosne poluge
Tibode **F**



Povucite tijelo prema natrag **G**
i gurnite upravljač naprijed. **H**



Pritisnite prema dolje i maknite
Tibodu **I**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



- PATENTIRANI SISTEM ZA ULTRA BRZO POSTAVLJANJE, OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA. JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE I ZA KVADRIPLEGIČARE



- MAKS. BRZINA PREMA ZAKONU (15KM / H)
- PRILAGODLJIVA BRZINA POMOĆU AKCELATORA, QUAD/ČETVEROKOTAČ STIL



- AUTOMATSKI POVRATNI SISTEM UPRAVLJAČA, ČAK I KAD JE TIBODA STACIONARNA
- JEDNA BRZINA
- RIKVERC/VOŽNJA UNATRAJ



- 16" OJAČANI ALUMINIJSKI KOTAČ SA PNEUMATSKOM GUMOM



- KOČNICA MOTORA SA REGENERATIVNIM SUSTAVOM ZA PUNJENJE BATERIJE
- 160MM MEHANIČKA DISK-KOČNICA



- OKVIR OD PLASTIFICIRANE ALUMINIJSKE LEGURE



- TEŽINA 13,2 KG 'TB030-TB040'
- TEŽINA 15,2 KG 'TB075-TB100'
- TEŽINA BATERIJE: OD 2,5 DO 3,2 KG
- TEŽINA OVIJES SUSTAVA 2,45KG



- OKVIR OD PLASTIFICIRANE ALUMINIJSKE LEGURE
- PRILAGOĐENA BOJA DOSTUPNA NA ZAHTJEV



- DOMET 50 / 55KM **
- VRIJEME PUNJENJA BATERIJE 4/5 SATI
- UKLJUČEN PUNJAČ BATERIJA
- USB UTIČNICA U BATERIJI



- CE CERTIFIKAT
- USKLADENO SA EN60601-1 I EN60601-1-2

** Indikativna vrijednost - Mješoviti teren, nagib 15% - Ispitano sa pacijentom težine 70 kg i 48v baterijom od 11,6Ah

DOSTUPNI MODELI



Cod. TB030N - Crno
Cod. TB030B - Bijelo
Motor 300W
36V 10,4Ah



Cod. TB040N - Crno
Cod. TB040B - Bijelo
Motor 400W
48V 10,4Ah




Cod. TB075N - Crno
Cod. TB075B - Bijelo
Motor 750W
36V 13Ah



Cod. TB100N - Crno
Cod. TB100B - Bijelo
Motor 1000W
48V 11,6Ah


PRILAGODITE SVOJU TIBODU

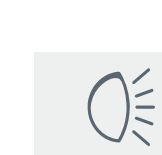

Prednje svjetlo
sa zvučnim signalom



Prednje svjetlo
punjivo preko USB-om

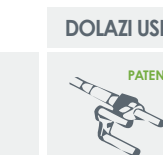


Ručka kočnice za
kvadruplegičare



Ručka akceleratora
za kvadruplegičare




Retrovizori
(lijevi i desni)

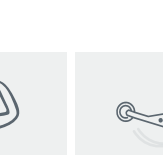

Prikaz na ekranu
Pokazatelj brzine

Prosečna brzina
Maks. brzina
Km rute
Vrijeme putovanja
Indikator stanja baterije
Apsorbirana snaga

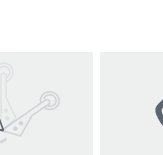

Rotirajuća parkirna
nogica

radi uštede prostora
prilikom transporta



Kod naručivanja
specijalne boje

potrebno je navesti
RAL kod