



Kompas™

LAGANA | KOMPAKTNA | PRIKLADNA



Invacare Kompas kolica kombiniraju slobodu kretanja elektromotornim kolicima te kompaktan dizajn invalidskih kolica na ručni pogon. Upravo to ih čini idealnim za pojedince koji žive aktivan i neovisan način života. Kompas kolica predstavljaju jedna od najlakših i najkompaktnijih sklopivih elektromotornih invalidskih kolica. Ne ugrožavaju prostor te su vrlo praktična. Svestrana kolica sa savršenim pogonom idealno su rješenje za one koji žele izvući maksimum iz života.

## Lako sklopiva i kompaktna

Zahvaljujući kreativnom dizajnu, Kompas kolica se brzo i jednostavno sklapaju u samo jednom koraku minimalizirajući vrijeme i trud. Sklopljena kolica imaju izuzetno male dimenzije usporedive sa sklopljenim ručnim invalidskim kolicima. Kolica imaju kompaktnu veličinu te sposobnost vertikalnog stajanja kada su sklopljena.

Upravo to čini ova kolica idealnim za čuvanje u uskim prostorima kao što je prostor ispod stepenica ili između namještaja.



## Izuzetno lagana i lako prenosiva

S težinom manjom od 21 kg, Kompas su najlakša i najkompaktnija elektromotorna kolica u širokom portfelju Invacare proizvoda.

Optimizirana su za lako rukovanje i po potrebi lako prenosiva kako bi se lako unijela u kućni prostor ili smjestila u prtljažnik automobila.



## Svestrana, prikladna i zabavna!

Bilo za kućnu upotrebu, uzbuđujuće izlete ili svakodnevne aktivnosti, lako pokretljiva Invacare Kompas elektromotorna kolica mogu doseći domet od 11 km. Jednostavno sklopite i krenite!



# 5

## KLJUČNE ZNAČAJKE

1

### Potpuno prilagodljive

▶ Naslon podesiv po visini pruža dodatnu potporu i udobnost višim osobama.

▶ Preklopna pedala protiv klizanja sa mogućnošću prilagodbe na 3 različite visine pruža dodatnu praktičnost



2

### Uklonjiva Lithium baterija

▶ Izmjenjiva baterija od 11,4ah ima dodatni priključak za punjenje i indikator baterije.

▶ Za razliku od mnogih drugih sklopivih električnih invalidskih kolica, nije potrebno uklanjati bateriju da biste je sklopili.



5

### Lagani okvir

▶ Sa okvirom lakšim od 21kg, kompaktna elektromotorna invalidska kolica Kompas se mogu bez muke podići i prenijeti kada je potrebno.



4

### Sigurnosni kotačići protiv prevrtanja

▶ Primjenjivi i kada su kolica sklopljena, omogućuju lakše kretanje prilikom transporta i dodatno stabiliziraju prilikom skladištenja.

3

### Mehanizam sklapanja u jednom koraku

▶ Sklapanje i rasklapanje je jednostavno i lako.

▶ Dimenzije sklopljenih kolica - 590 x 370 x 810 mm



## Dodatne mogućnosti


- ▶ Izdržljiv UK P&G upravljač
  - Upravljač visoke kvalitete sa prikazom stanja baterije i mogućnošću lake kontrole brzine i okretnosti
  - Opremljen prikladnim priključkom za punjenje na putu.
- ▶ Pametan sustav kočenja
  - Automatski sprječava nenamjerno kretanje dok miruju, učinkovito zaključavajući invalidska kolica na mjestu.
- ▶ Zadnje pneumatske gume
  - Za udobniju vožnju te prilagođene za vanjsku upotrebu.
- ▶ Košara za stvari
  - Uklonjiva najlonska košara prikladna za prijevoz manjih predmeta, smještena ispod sjedišta.
- ▶ Ručica za prebacivanje u ručni pogon
  - Lako upravljiva ručica za prebacivanje sa elektromotornog na ručni pogon
- ▶ Dodatna 17.1Ah litijska baterija
  - Baterija dodatnog kapaciteta do 18km dometa.

## Tehnički podaci ▼

Za opsežnije informacije o prodaji o ovom proizvodu, uključujući korisnički priručnik proizvoda, molimo vas pogledajte Orto Rea stranicu

Širina sjedišta ▼	Dubina sjedišta ▼	Visina od poda ▼	Dimenzije sklopljenih kolica ▼	Širina podvozja s kotačima ▼	Ukupna dužina uključujući oslonce za noge ▼	Ukupna visina ▼
Kompas	460mm	420mm	590 x 370 x 810mm	590mm	970mm	950-1000mm
Ukupna težina ▼	Maksimalna težina korisnika ▼	Kapacitet baterije ▼	Težina baterije ▼	Snaga motora ▼	Radius okretanja ▼	Razmak od tla ▼
Kompas	20.9kg -bez baterije	115kg	24 volt/11.4ah lithium ion baterija	2.1kg	DC24V,70 watt	825mm
Maksimalni sigurnosni nagib ▼	Domet vožnje ▼	Brzina ▼	Promjer stražnjih kotača ▼	Promjer prednjih kotačića ▼		
Kompas	6°	11km / 6.8miles	6.4 kph / 4 mph	8" pneumatic	7" PU	

## Boja okvira ▼

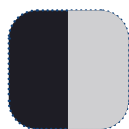

Black & Grey

## Boja presvlake ▼



Black

Zastupnik za Hrvatsku



Orto Rea d.o.o. | Braće Radića 52/b, Jalkovec, Varaždin  
tel: +385 42 350 744  
email: info@ortorea.hr | http://www.ortorea.hr

Tel: +41 61 487 70 70  
hqeurope@invacare.com  
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Switzerland



Yes, you can.®



© 2020 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print.

Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. Kompas - EU - 09/2020