



erivo®



Lagana i sklopiva
električna invalidska
kolica



**Idi gdje god poželiš.
Budi slobodan.**

Putuj opušteno uz erivo.

Vaš kompaktni suputnik za svakodnevni život i putovanja

Budite neovisni i samostalni, izađite na svježi zrak s prijateljima, uživajte u suncu u parku s obitelji, idite na dugo iščekivani odmor s partnerom - erivo Vam pomaže da ostanete mobilni i pruža novu razinu kvalitete života. Erivo se jednostavno sklapa i lako se prenosi bilo kojim prijevoznim sredstvom zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini. Ponovno sanjajte o odredištima umjesto da brinete o putu.



elegant & practical



U svijetu u kojem živimo gdje smo sve više umreženi jedni s drugima, jedna stvar je važnija od svega: mobilnost. Zato su nam potrebna pomagala koja odgovaraju našem načinu života i pomažu nam prevladati prepreke. Ona moraju biti pouzdana, fleksibilna i jednostavna za korištenje – i naravno, udobna.

+ **erivo**. design



Vrhunska izvedba

Svojim elegantnim oblikom, kombinacijom boja i visokokvalitetnim materijalima postavlja nove standarde u dizajnu i uvijek ostavlja dojam stila.

- ✓ **Dvobojna završna obrada**
in champagne gold & matte black
- ✓ **Sportski i čvrsti dizajn okvira**



+ **erivo**. comfort



Savršeno udoban

Jedan od najvažnijih čimbenika kod električnih invalidskih kolica je udobnost sjedenja. Erivo se ističe promišljenom ergonomijom, vrhunskim materijalima i vrhunskom izradom. Kvalitetna pjena osigurava udobnost sjedenja i dobru potporu u svakom trenutku.

- ✓ **Ergonomija**
čvrsto sjedište i visokokvalitetna memorijska spužva
- ✓ **Prozračni materijal**



Visoka kvaliteta

Učinkovita stražnja suspenzija kotača u kombinaciji s pneumatskim gumama osigurava izvanrednu udobnost vožnje. Veliki prednji kotači potpuno su otporni na probijanje, nude dobru amortizaciju i idealnu potporu prilikom prelaska malih prepreka.

- ✓ **Suspenzija i veliki pneumatski kotači**
stražnji kotač je cca 32 cm
- ✓ **Kotači od PU (poliuretanske) gume otporni na probijanje**
prednji kotač je cca 21 cm



easy & flexible

+ erivo® function



Pametni način sklapanja

Erivo se sklapa jednim pokretom ruke kako bi se uštedjelo na prostoru i vremenu. Gotovo je jednako velik kao mala kofer torba i može stati u bilo koji kutak Vašega doma – ili Vas može lako pratiti na sljedećem putovanju.


Upravljačka jedinica, oslonci za ruke i noge

Erivo nudi maksimalnu pokretljivost uz pomoć upravljačke jedinice (koja se može okretati) i sklopivih oslonaca za ruke. To Vam omogućuje da se približite stolovima ili lako promijenite mjesto. Oslonci za stopala također se mogu okrenuti i podesiti po visini.

Moćna baterija

Moćna baterija je smještena ispod sjedala i može se ukloniti bez alata. S uključenim automatskim punjačem, može se puniti i dok je namještena. Maksimalna razina punjenja postiže se za samo 6 sati.

- ✓ Sklapa se jednim pokretom ruke
- ✓ Podesivi oslonci za noge
- ✓ Brzo skladištenje i čuvanje prostora
- ✓ Fleksibilna kontrolna jedinica i oslonci za ruke

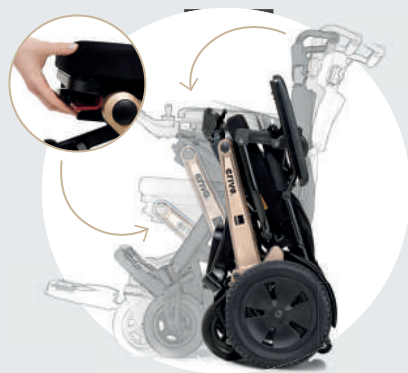

+ erivo® dynamism



Upravljačka jedinica

Intuitivna upravljačka jedinica nudi beskonačno podesivu i preciznu kontrolu brzine vožnje što omogućuje korisniku eriva da sigurno manevrira u uskim prostorima.

- ✓ Precizna i okretna kontrola
- ✓ Neprekidno podešavanje brzine (1-6 km/h)



Ponovno otkrijte svoja omiljena mjesta.

Erivo pomaže ne samo u svakodnevnom životu već ga njegova kompaktna veličina čini prenosivim u bilo kojem prijevoznom sredstvu, a idealan je suputnik za vaše sljedeće putovanje.

Bilo da je riječ o dugo planiranom obiteljskom odmoru ili spontanom putovanju s prijateljima – Vi i Vaš erivo uvijek ste spremni za doživljaj. A ako dugotrajan akumulator ipak iscrpi energiju, nema razloga za brigu: erivo se potpuno napuni za samo 6 sati i spreman je za novu avanturu.



car



airplane



ship



bus



caravan



train



Sklopite erivo jednim pokretom ruke i lako putujte u bilo kojem prijevoznom sredstvu – a jednako lako se rasklopi kada je to potrebno. Otkrijte nova područja ili uživajte u svom osobnom omiljenom mjestu bez brige.

Tijekom razvoja, posebno smo se fokusirali na udobnost sjedenja. To je osigurano suspenzijom, velikim stražnjim kotačima s pneumatskim gumama i ergonomskim sjedalom. Sjednite i doživite sjajne trenutke uz malu pomoć eriva.



Simply mobile.

erivo.

+ erivo® overview

Fleksibilna kontrolna jedinica

Omogućuje primicanje bliže stolu



Pametna tehnologija sklapanja i kompaktan dizajn

Dimenzije sklopljenih kolica: š x v x d): 63,5 x 86,4 x 53,3 cm

Baterija

Dugi domet (18/35 km) i brzo punjenje

Sklopivi oslonci za ruke

Jednostavno ustajanje i sjedanje



Oslonci za noge

Fleksibilni i podesivi po visini

Upravljačka jedinica

Intuitivno upravljanje putem upravljačke jedinice. Neprekidno podešavanje brzine od 1 do 6 km/h

Karakteristike za najbolju vožnju

Veliki prednji kotači otporni na probijanje Pneumatske gume i posebna stražnja suspenzija kotača

Idealna ergonomija sjedišta

Čvrsto i oblikovano sjedište Prozračni i visokokvalitetni materijali

Inovativni dizajn

Elegantni i sportski okvir u šampanj-zlatnoj i mat crnoj boji



Tehničke specifikacije

Težina

Bez baterije: od 27,2 kg

Težina standardne baterije: 2,4 kg

Težina dodatne baterije: 4,5 kg

Kapacitet baterije

Standardna baterija: 11,0 Ah

Dodatna baterija: 30,15 Ah

Dimenzije sjedišta

Širina sjedišta: 45 cm

Dubina sjedišta: 47 cm

Visina naslona za leđa: 45 cm

Visina sjedišta: 51 cm

Ukupna dužina: 97 cm

Tehnički podaci

Snaga motora: 250 W

Maksimalna težina korisnika: 150 kg



ORTO REA ZAGREB
Franje Lučića 32, 10000 Zagreb
tel. +385 1 638 2262
email: maloprodajazg@ortorea.hr



shop.ortorea.hr
email:info@ortorea.hr



Simply mobile.

erivo.